

## Разработка ВЭЖХ разделений.

ВЭЖХ наборы и колонки  
премиум-класса NanoSpher®


- + Вам интересна услуга разработки или адаптации ВЭЖХ разделений с последующей валидацией?
- + Вы занимаетесь регистрацией лекарственных средств, но у Вас нет возможности самим адаптировать и валидировать аналитические методики?
- + Вас привлекает возможность закупать колонки премиум-класса, проверенные по индивидуальному тесту?

### Для Вас мы можем разработать специальный ВЭЖХ набор NanoSpher®!

ВЭЖХ набор NanoSpher® – это набор, состоящий из хроматографической колонки и текста методики разделения. Оформление методики производится согласно международным рекомендациям и при необходимости легко адаптируется под любые нормативные документы. Опционально в набор могут также входить: стандартные вещества, протокол валидации методики, полный отчет о проведенном исследовании по разработке методики.

### Оформление заказа

Для оформления заказа свяжитесь с нами по телефону +7(495)210-1888, и мы вышлем бланк заказа, в который Вы впишете требования к разделению. После заполнения отправьте бланк на электронную почту [mail@hplc.ru](mailto:mail@hplc.ru).

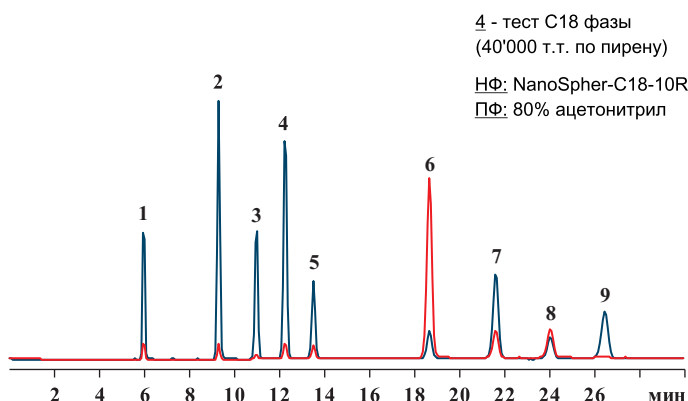

+7 (495) 210-1888

[mail@hplc.ru](mailto:mail@hplc.ru)



Решения  
в области ВЭЖХ  
с 1987 года


[www.hplc.ru](http://www.hplc.ru)

[www.chromforum.ru](http://www.chromforum.ru)



### ВЭЖХ колонки премиум-класса NanoSpher®

NanoSpher – это торговая марка "Элсико" для ВЭЖХ колонок премиум-класса. Мы тестируем линейки колонок ведущих мировых производителей и отбираем из них наилучшие. Все колонки NanoSpher проходят внутренний контроль качества "Элсико" и поставляются с сертификатами соответствия.

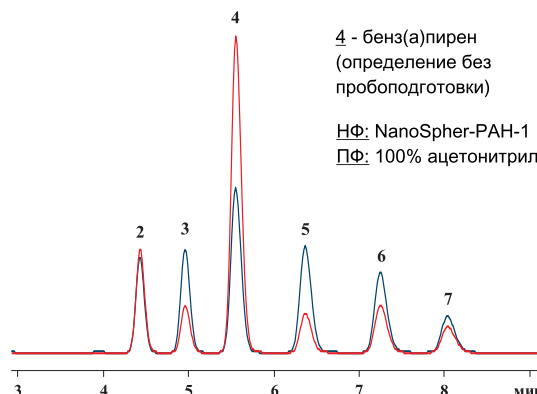

1.7 - t<sub>0</sub> (нулевое время)  
3.1 - С (аскорбиновая кислота)  
3.8 - В1 (тиамин)

НФ: NanoSpher-WSVitamins-2  
ПФ: 60% ацетонитрила в 15мМ  
фосфатном буфере KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> + 0.1%  
фосфорной к-ты  
Объемная скорость: 1.5 мл/мин  
Детектирование: 220 нм  
Температура: 30 °С

